



Pura


Rotācijas valcētājs

gandus[®]
SALDATRICI
Medical Sealers Division
We care

Pura

Rotācijas valcētājs

Produkta dizains izstrādāts un tehniski projektēts ar Milānas Politehniskās universitātes Dizaina departamenta zinātnisko atbalstu.

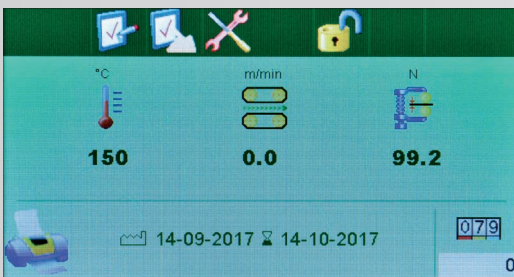

Validējams valcēšanas process

Precīza temperatūras kontrole pateicoties jaunās paaudzes vadības aparatūrai un programmatūrai. Pilnībā atbilst EN ISO 11607-2 standarta un EN ISO TS 16775 starptautisko vadlīniju prasībām

Drošība

Uzticama un labi zināmais Gandus 15mm platais daudzlīniju valcējums garantē perfektu valcējuma izturību, kā arī vieglu un drošu atplēšanu.

Ārējie interfeisi

USB un RS 232 interfeisi ļauj sazināties ar vairākām ārējām ierīcēm.

Izsekojamība

Pura ļauj pilnībā izsekot visiem blīvējuma parametriem ar standarta USB zibatmiņu.

SecureScan datu augšupielādes programmatūra

Izmantojot skeneri, SecureScan Data Upload programmatūra ļauj visus datus augšupielādēt uz valcētāja.

Iepakojums

Pura ir piemērota visu zināmo valcējamo, iepriekš sagatavoto sterilu barjeru sistēmu, nepārklāta Tyvek®, kā arī jaunākās paaudzes iepakojuma materiāla noslēgšanai.

Skārienjutīgs ekrāns

4,3" krāsains skārienjutīgs ekrāns un programmatūra ir ērti lietotājam.

Kompakts

Pura uz pakojamā galda aizņem tikai 0,15m².

Tīrīšana un dezinfekcija

Neticami ergonomiskā dizaina nerūsējošā tērauda un anodizēta alumīnija ierīce ir viegli un efektīvi tīrāma un dezinficējama.

Drukšanas iespējas

Jaunās paaudzes 9 punktu matricas printeris ļauj izdrukāt uz iepakojumiem visus nepieciešamos datus.

Enerģijas taupīšana

Visi mūsu medicīniskie valcētāji ir izstrādāti un ražoti tā, lai varētu optimizēt procesu, pilnībā ievērojot enerģijas taupīšanas efektivitāti.

VISPĀRĪGĀS ĪPAŠĪBAS

- Anodizēts alumīnijs un AISI 304 markas nerūsējošais tērauds
- Iebūvēta, regulējama vadotne
- Regulējama brīvā mala

VALCĒŠANA

- Daudzlīniju rotācijas valcēšana (vienlaidus pēc izvēles)
- Šuves platums 15 mm
- Attālums starp šuvi un instrumentiem ≥30 mm (DIN noteikumi)

VALCĒJAMIE MATERIĀLI

- EN 868-5 maisiņi un ruļļi/Tyvek® maisiņi
- EN 868-4 papīra maisiņi/maisīni ar ieloci
- Laminēti AL maisiņi/PP maisiņi
- Ultra® maisiņi

ISO 11607-2

- Valcēšanas validācija, izmantojot automātisko valcēšanas kritisko parametru kontroli
- Temperatūras/spiediena/ātruma kontrole
- Valcēšanas parametru ierakstīšana
- Ierakstu vizualizācija
- Temperatūras pārsniegšanas zonde
- Valcētāja darbības diagnostika un pārbaude
- Trauksmes un apstāšanās temperatūras pielāde +/- 5° C (DIN 58953-7:2010)
- Spēka/ātruma/laika trauksme un apstāšanās

SERTIFIKĀCIJA /DROŠĪBA

- UNI EN ISO 11607-2:2006
- UNI EN 868-5
- EN ISO TS 16775
- DIN 58953-7:2010
- Direktīva 2006/42/EC
- Direktīva 2014/30/EU

Direktīva 2014/35/EU

- Izgatavots ar UNI EN ISO 9001: 2015 kvalitātes sistēmu sertificētā uzņēmumā

PARAMETRI

- Valcēšanas ātrums 10 m/min
- Maksimālā valcēšanas temperatūra 200° C
- Valcēšanas references spēks 100 N
- Temperatūras tolerance ± 1%
- Spēka diapazons 80-120 N

KALIBRĒŠANA

- Silidšanas autokalibrācijas funkcija
- Automātiska pašpārbaudes funkcija termopāra akumulatora un attālinātā servera stāvoklī
- startēšanas laikā
- Temperatūras/spēka/ātruma kalibrēšana

FUNKCIJAS

- Mikroprocesors
- Valodu izvēle
- Palaišanas un drukāšanas fotoelementi
- Temperatūras iestatīšanas
- Ātruma iestatīšana
- Operatora/partijas/kataloga iestatīšana
- Pakošanas programmu iestatīšana
- Derīguma termiņa iestatīšanas
- Gaidīšanas režīms un enerģijas taupīšana
- Iebūvēta baterijas
- Iestatījumu un apkopes paroles
- Absolūtais skaitītājs
- Iestatāms skaitītājs
- Apkopes skaitītājs
- Pulksteņa un kalendāra funkcija
- Skaņas signāls ieslēgts/izslēgts
- Ieprogrammēta apkope

INTERFEISI

- Krāsains skārienekrāns 4,3"
- Datora savienojums
- Tālvadība, izmantojot Ethernet
- Uzlīmju printeris
- Svītrkodu skaners
- Lan tīkls/RS 232 porti/USB ports/Ethernet
- Ethernet savienojuma konfigurācijas dati
- Ierakstu dublēšana datorā

IEBŪVĒTA PRINTERA FUNKCIJAS

- Ieslēgta/izslēgta printēšana
- EN/CE simboli
- 1 drukas rinda
- Regulējama drukas pozīcija
- Standarta vai par 180° apgriezts drukas attēls
- Drukams automātiska pielāgošana maiņai
- Iestatāms drukāšanas formāts/rakstzīmju izmēri
- Iestatāma drukāšanas secība
- Izgatavošanas un derīguma termiņš
- Partijas un operatora burtciparu kods
- Kataloga virknes
- Maisiņu pieaugošais skaitlis
- Maisiņa un valcētāja ID
- Valcēšanas temperatūra/spēks/ātrums
- Valcēšanas pārskats

UZLĪMJU PRINTERA FUNKCIJAS

- Ieslēgta/izslēgta drukāšana
- CE simboli
- Svītrkods
- Uzlīmju izmēru iestatīšana
- Standarta vai par 180° apgriezts drukas attēls
- Vairāku uzlīmju drukāšana
- Iestatāma drukāšanas secība

- Izgatavošanas un derīguma termiņš
- Partijas un operatora burtciparu kods
- Kataloga virknes
- Maisiņu pieaugošais skaitlis
- Maisiņa un valcētāja ID
- Valcēšanas temperatūra/spēks/ātrums
- Valcēšanas pārskats

ĀRĒJAS PERIFĒRIJAS

- Uzlīmju printeris
- Svītrkodu skaners

IZSEKOJAMĪBA UN PROGRAMMATŪRA

- Izsekojamība, izmantojot USB zibatmiņu
- SECURSCAN datu augšupielādes programmatūra

DATU BĀZE

- Teksta saglabāšana
- Maisiņa/valcētāja ID saglabāšana
- Operatora/derīguma termiņa/partijas koda saglabāšana
- Iepriekš iestatītās programmas

STRĀVAS AVOTS

- Vienfāzes 100; 110/115; 230/240 VAC
- Frekvence 50/60 Hz
- Maksimālā jauda 600 W

PIEDERUMI PĒC PIEPRASĪJUMA

- Priekšējais atbalsta galdiņš/ruļļu atbalsta galdiņš/ruļļu turētājs
- Uzlīmju printeris
- Svītrkodu skaners
- Ethernet modulis

gandus
SALDATRICI
Medical Sealers Division

Gandus Saldatrici S.r.l. socio unico

Via Milano, 5 - 20010 Cornaredo (Milano) Italy Tel. +39 02 93.19.41 - Fax +39 02 93.56.88.03 info@gandus.it - www.gandus.it